

MD-Disc

Zur Verwendung mit Xmatic und Xmatic Compact

Benutzerhandbuch

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

Inhaltsverzeichnis


1	Beschreibung	2
2	Übersicht	3
3	Sicherheitsvorkehrungen	3
4	Installation	4
5	Wartung und Service	4

1 Beschreibung

Die MD-Disc besteht aus einer magnetischen Unterlage auf einem Metallsockel und ist für den Einsatz auf Struers Schleif- und Poliermaschinen vorgesehen, um die Verwendung von MD-Unterlagen zu ermöglichen.

Typen		
250 mm (10") Durchmesser	Höhe	42 mm (1,7")
	Gewicht	3,842 kg (9 lbs)
300 mm (12") Durchmesser	Gewicht	6,153 kg (13 lbs)
	Höhe	42 mm (1,7")

2 Übersicht

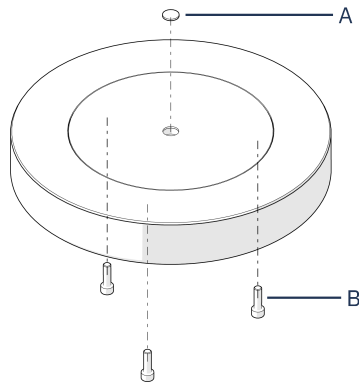

A Schutzkappe

B Transportschrauben (M6 20 mm)



Hinweis

Die Schrauben werden auf der Rückseite der MD-Disc montiert.

3 Sicherheitsvorkehrungen



Vor Gebrauch sorgfältig lesen


1. Das Gerät muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften angeschlossen werden. Das Gerät und alle angeschlossenen Geräte müssen ordnungsgemäß funktionieren.
2. Das Gerät muss sicher befestigt sein.
3. Tragen Sie beim Umgang mit schweren Geräteteilen Sicherheitsschuhe.

4 Installation




Hinweis

Wir empfehlen die Installation der MD-Disc durch einen qualifizierten Techniker.

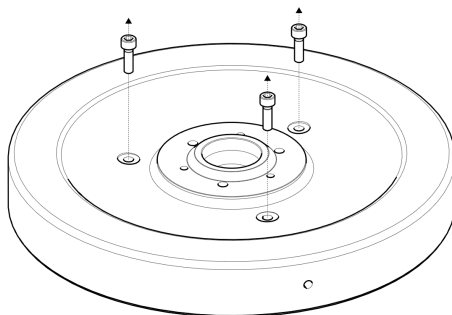

1. Entfernen Sie die Transportschrauben (M6 20 mm).

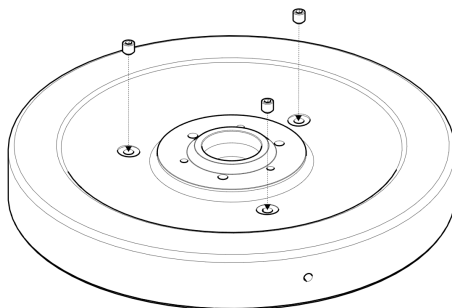

2. Montieren Sie die Stellschrauben, um die Löcher abzudecken.

5 Wartung und Service

Weitere Informationen zur Wartung finden Sie in der Betriebsanleitung des entsprechenden Geräts.

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Dänemark
Telefon +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Copyright

Der Inhalt der Betriebsanleitung ist Eigentum von Struers ApS. Die Reproduktion von Teilen dieser Betriebsanleitung ohne schriftliche Genehmigung von Struers ApS ist nicht gestattet.

Alle Rechte vorbehalten. © Struers ApS.